


SORBACT® FOAM GENTLE BORDER

Infektionsförebyggande skumförband med mjuk silikonkant

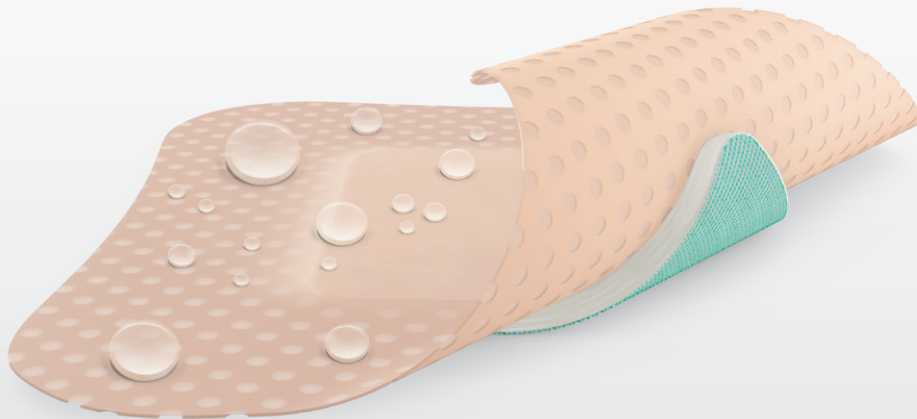

ETT SKONSAMT ALLT-I-ETT FÖRBAND SOM MINSKAR DEN MIKROBIELLA BELASTNINGEN


Sorbact® Foam Gentle Border är ett sterilt, bakterie- och svampbindande, självhäftande och absorberande sårförband. Den består av ett grönt Sorbact® sårkontaktlager, kombinerad med polyuretanskum, mjuka självhäftande kanter i silikon och en ångpermeabel baksidesfilm i polyuretan. Sorbact® Foam Gentle Border har ett brett användningsområde och passar många olika typer av sår.

Produkt	Art. nr	Storlek	Stl. sårdyna	St/förp.
Sorbact® Foam Gentle Border	98531	7,5x7,5 cm	3,5x3,5 cm	10
Sorbact® Foam Gentle Border	98532	10x10 cm	5x5 cm	10
Sorbact® Foam Gentle Border	98533	15x15 cm	10,5x10,5 cm	10



AVSEDD ANVÄNDNING

Sorbact® Foam Gentle Border är avsedd att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade sår med måttliga vätskemängder, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetessår samt fot- och bensår.

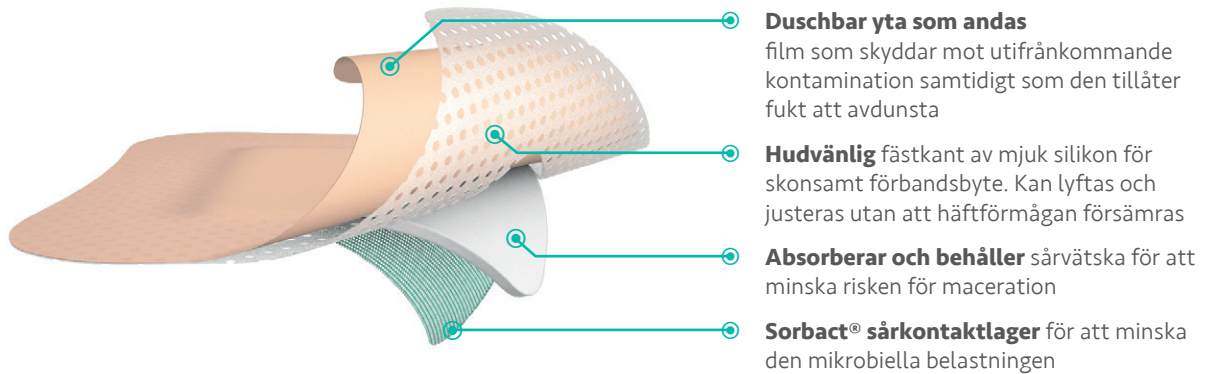

BRUKSANVISNING

1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis. Se till att omgivande hud är ren och torr.
 2. Välj lämplig förbandstorlek för såret. Förbandet ska överlappa såret med minst 1 cm för att minska risken för maceration.
 3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
 4. Ta bort skyddsfilm från sårkontaktytan.
 5. Applicera förbandet. Sträck inte förbandet. Se till att den gröna sidan av förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan.
 6. Tryck lätt på kanterna mot den omgivande huden. Om nödvändigt kan förbandet justeras och återappliceras.
 7. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt sårets och den omgivande hudens tillstånd.
- Förbandet kan användas vid kompressionsbehandling.



SORBACT® – FÖREBYGGER INFEKTION

Sorbact® mikrobiellt bindande förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera den mikrobiella belastningen på naturlig väg. Mikroorganismerna binds irreversibelt till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts