


# SORBACT® GEL DRESSING

Infektionsförebyggande sårkontaktlager med hydrogel

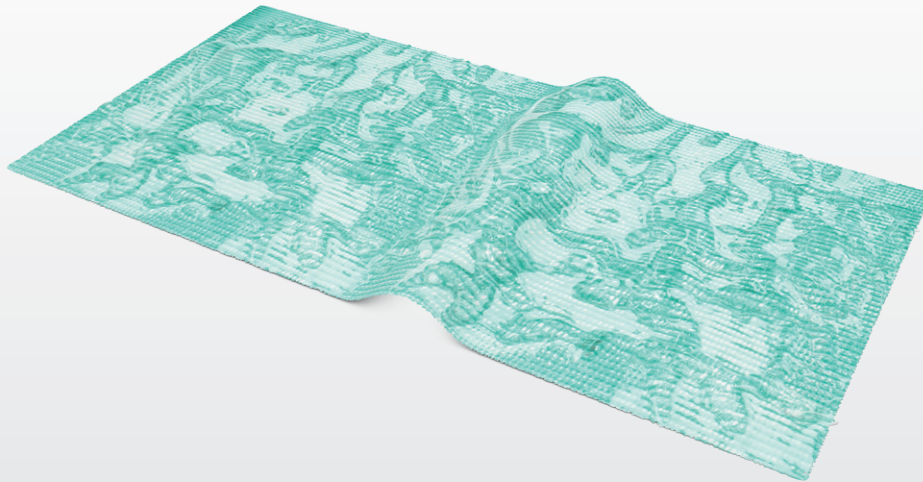

## MINSKAR DEN MIKROBIELLA BELASTNINGEN I TORRA TILL LÄTT VÄTSKANDE SÅR

*Sorbact® Gel Dressing är ett sterilt bakterie- och svampbindande förband täckt med gel. Det består av ett grönt Sorbact® sårkontaktlager med en vattenbaserad gel, som innehåller karbomer och propylenglykol. Sorbact® Gel Dressing avger fukt och bidrar till att skapa en fuktig sårmiljö.*

Produkt	Art. nr	Storlek	St/förp.
Sorbact® Gel Dressing	98136	7,5x7,5 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98137	7,5x15 cm	10
Sorbact® Gel Dressing	98139	3x15 cm	10



## AVSEDD ANVÄNDNING

Sorbact® Gel Dressing är avsedd att användas vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade torra sår eller sår med låga vätskemängder, såsom traumasår, brännsår, kaviteter, fistlar, trycksår, diabetessår och fot- och bensår.

## BRUKSANVISNING

1. Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis.
2. Välj lämplig förbandstorlek för såret.
3. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik.
4. Använd aseptisk teknik om förbandet klipps. Kassera öppnade och oanvända förband.
5. Applicera förbandet. Se till att förbandet kommer i direktkontakt med hela sårytan. Förbandet ska inte överlappa den omgivande huden.
6. Vid kaviteter och fistlar ska alltid en del av förbandet sticka ut så att det lätt kan avlägsnas.
7. Applicera ett lämpligt sekundärförband.
8. Hur ofta förbandet behöver bytas beror på hur mycket såret vätskar samt på sårets och den omgivande hudens allmänna tillstånd. Om det kliniska tillståndet tillåter kan förbandet sitta på i upp till sju dagar.



## SORBACT® – FÖREBYGGER INFEKTION

Sorbact® mikrobiellt bindande förband förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera den mikrobiella belastningen på naturlig väg. Mikroorganismerna binds irreversibelt till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts