


Attends® Soft



Attends - Systemet med 10 absorptionsnivåer för inkontinens

Attends Soft är en serie anatomiskt formade skydd framtagna för att hantera dropp/lätt/tung urininkontinens.

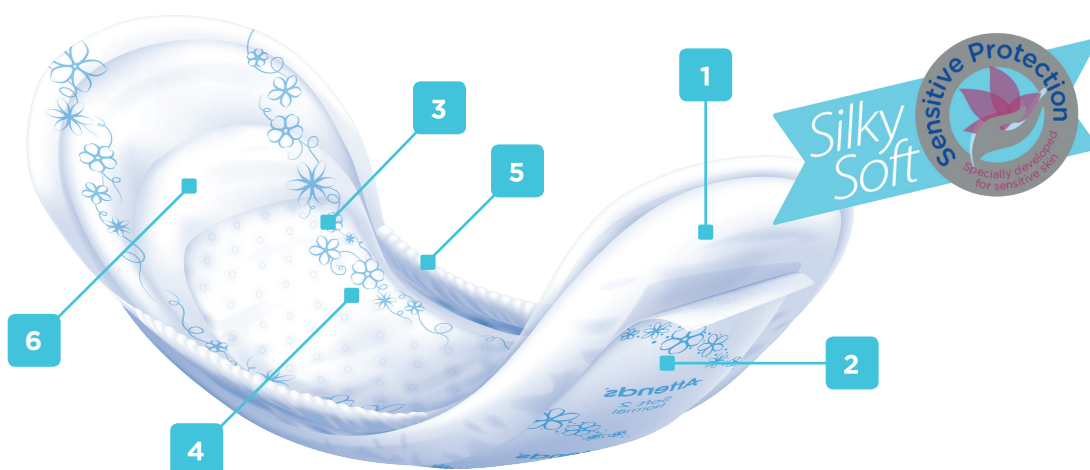

1

Vitt andningsbart spärrskikt ger ökad komfort, diskretion och god hudvård.

2

Fixeringstejp som gör det möjligt att använda skyddet tillsammans med tätt åtsittande underkläder för extra diskretion.

3

Anatomiskt utformad kärna för en smidig och komfortabel passform.

4

Superabsorberande kärna med spridningsskikt för ökad läckagesäkerhet, torrhet och minskad lukt.

5

Mjuk elastik (Soft 2 - 7) ger skyddet en naturligt kupad form för en förbättrad passform och minskad risk för läckage.

6

Silkesmjukt och hudvänligt ytskikt speciellt utvecklat för sensitiv och känslig hud.



Attends Soft är testade och godkända av proDERM, institutet för dermatologisk forskning.

För mer information besök www.attends.se

	Antal/Avd.förp Antal/Trp.förp	Attends Artikelnummer	Längd (cm) Bredd i Grenen (cm)	Spärrskikt	Absorberande kärna	Ytskikt	Elastik	Fixeringstejp	Vikt (gram)	Abs. enligt ISO Rothwell (ml)
Attends Soft Micro 0 	28 224	205273	17.5 6	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Torrformerad kärna med fluff, superabsorbenter och syntetiska fiber med spridningsskikt	Non-woven	X	✓	3	66
Attends Soft Ultra Mini 0 	28 224	205075	20.5 6.5	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Torrformerad kärna med fluff, superabsorbenter och syntetiska fiber med spridningsskikt	Non-woven	X	✓	4	83
Attends Soft Mini 1 	20 240	205327	21.5 8	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Fluff and superabsorbenter med spridningsskikt	Non-woven	X	✓	8	195
Attends Soft Mini Long 1 	16 192	204863	27.5 8	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Fluff and superabsorbenter med spridningsskikt	Non-woven	X	✓	10	228
Attends Soft Normal 2 	12 96	207246	26.5 10.5	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med Quick-Dry Teknologi	Non-woven	Mjuk elastik	✓	15	350
Attends Soft Extra 3 	10 80	207260	32.5 12	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med Quick-Dry Teknologi	Non-woven	Mjuk elastik	✓	20	495
Attends Soft Extra Plus 3+ 	10 120	205112	36.5 13	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med Quick-Dry Teknologi	Non-woven	Mjuk elastik	✓	26	650
Attends Soft Super 4 	46 138	207673	38.5 14.5	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med Quick-Dry Teknologi	Non-woven	Mjuk elastik	✓	34	849
Attends Soft 5 	38 152	204771	47.5 16.5	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med Quick-Dry Teknologi	Non-woven	Mjuk elastik	✓	42	990
Attends Soft 6 	38 152	204795	47.5 16.5	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med Quick-Dry Teknologi	Non-woven	Mjuk elastik	✓	44	1064
Attends Soft 7 	34 136	204818	47.5 16.5	Laminat av nonwoven och andningsbar polyetenfilm	Dubbla absorptionslager med fluff och superabsorbenter med Quick-Dry Teknologi	Non-woven	Mjuk elastik	✓	52	1287



Natural Odour Protection

Natural Odour Protection minskar risken för otrevlig lukt.



Silkesmjukt ytskikt

Silkesmjukt och hudvänligt ytskikt.



Läckagebarriärer

(Soft 2-7)

Läckagebarriärer för ökat skydd mot läckage.



Andningsbar

Det andningsbara spärrskiktet tillåter huden att andas, vilket bidrar till en god hudvård.



Active Zone

(Soft 2-7)

Active Zone är ett område centrerat i mitten av skyddet som erbjuder hög absorption där det verkligen behövs. Hög absorption ger torrhet och ökad läckagesäkerhet för användaren.



Releasepapper

Nytt releasepapper med ett mönster av små blå blommor.



Singelförpackning

(Soft 1-3+)

Skydden är singelförpackade för förbättrad hygien och ökad diskretion.